


Befestigungskonsole BKK

ERLAU[®]
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

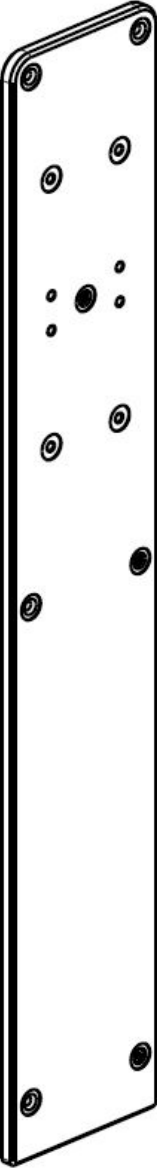


Gebrauchs- und
Montageanleitung




CE
2017/745/EU

Befestigungskonsole BKX

SN54195..

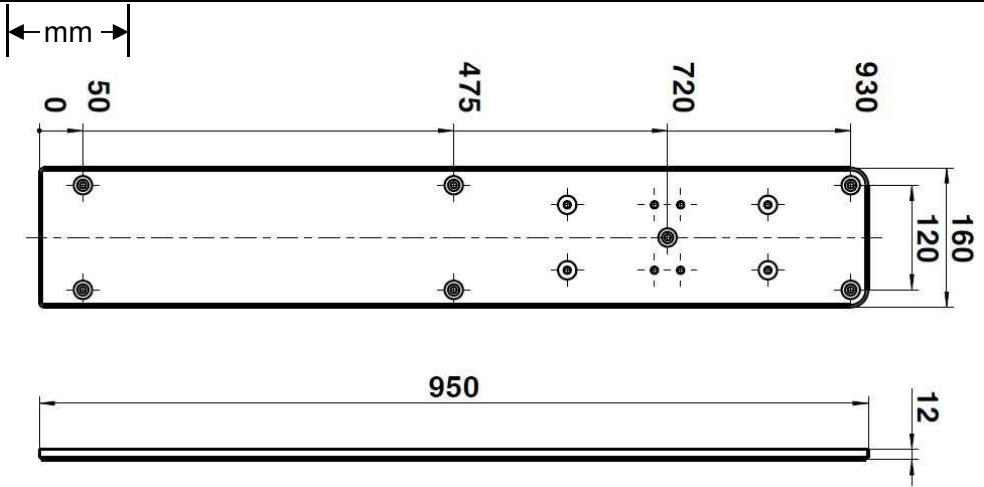


Befestigungstechnik

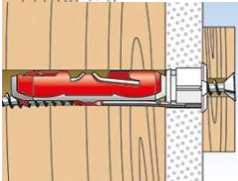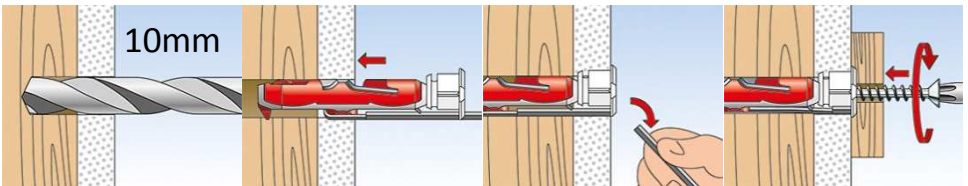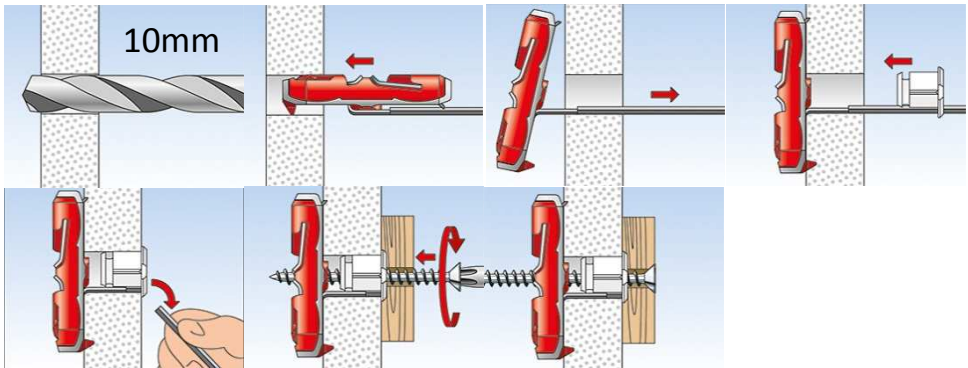

<https://www.fischer.de/de-de/produkte/hohlraum-befestigungen/kippduebel-klappduebel/nylon-kippduebel-fischer-duotec/537258-fischer-duotec-10>

Montage

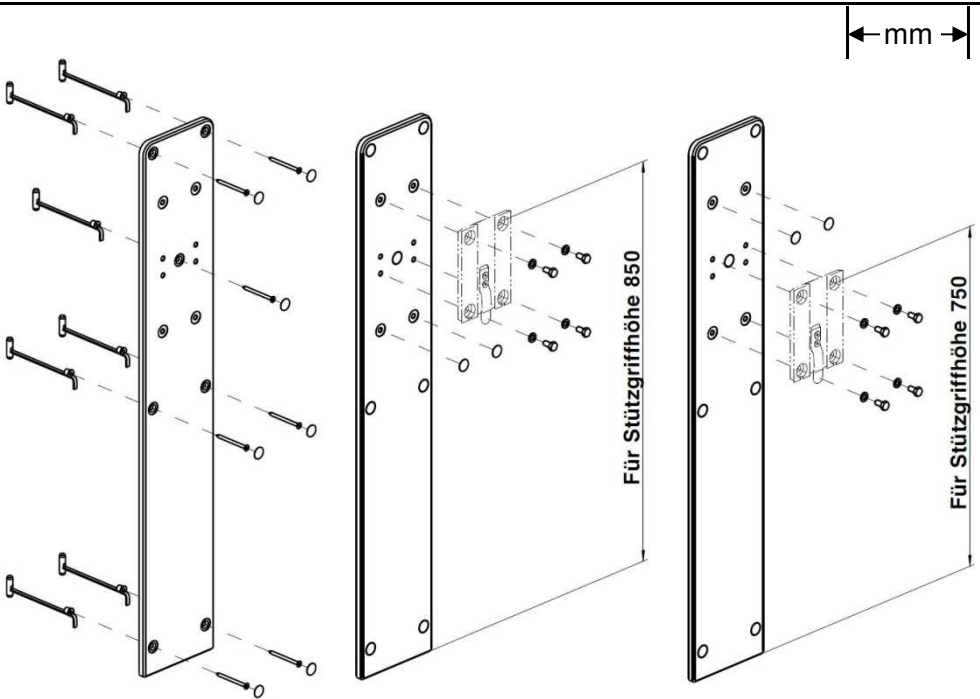

Warnhinweise



Anwendung:

Die Erlau Befestigungskonsole BKX erleichtert die Befestigung von Stützgriffen an Wänden mit verringerter Tragfähigkeit. Die Befestigungskonsole BKX verringert in ihrer Funktion die über die Dübel auf die Wand einwirkenden Kräfte um ca. 2/3. Die Befestigungskonsole BKX erhöht nicht die generelle Tragfähigkeit der Wand. Bei zu schwachen Wänden kann die Anbringung und die Nutzung von Stützgriffen auch zusammen mit der Befestigungskonsole BKX zu Ausbeulungen der Wand führen. Eine Ausbeulung der Wand kann zu Folgeschäden wie z.B. zum Abplatzen von Fliesen führen. Um Personenschäden vorzubeugen wird die Überprüfung der Tragfähigkeit der Wand, vor der ersten Benutzung eines Stützgriffes, dringend empfohlen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Statiker zu rate.

Die Gewährleistung für Schäden die aus der Benutzung von Produkten der Marke Erlau entstehen, die an nicht ausreichend tragfähigen Wänden befestigt wurden, ist ausgeschlossen.

Wenden Sie sich bei Fragen an die RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Tel. + 49 7361 504-0.

Pflegehinweise



Erlau Produkte verwenden im wesentlichen folgende Oberflächenmaterialien:

- Pulverlacke
- Chrom-Nickel
- Eloxiertes Aluminium
- Kunststoffe

Verwenden sie zur Reinigung der Oberflächen ein sauberes feuchtes Tuch aus Viskose oder Mischgewebe. Sollten Sie auf den Einsatz von Reinigungsmitteln nicht verzichten wollen, so verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel mit einem PH Wert zwischen 6 und 8. Geeignete Reinigungsmittel verwenden Wirkstoffe wie Phosphate, Seifen oder Tenside. Desinfektionsmittel auf alkoholischer Basis können ebenfalls verwendet werden. Testen Sie im Zweifelsfall das Reinigungsmittel an einer unauffälligen Stelle. Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel die z.B. Salzsäure, Essigsäure oder Ameisensäure enthalten. Verwenden Sie keine laugenhaltigen Reinigungsmittel wie Fußbodenreiniger, Industriereiniger oder Reiniger die Natriumhydroxid enthalten. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Aceton, Nitroverdünnung oder Waschbenzin. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Scheuerbürsten. Ältere Mikrofasertücher können durch anhaftenden Schmutz und Reinigungsmittelrückstände Kratzer verursachen und sind daher nur bedingt zu empfehlen. Entfernen Sie anhaftende Rückstände von Reinigungsmitteln oder Körperpflegeprodukten frühzeitig. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittelherstellers. Geeignete Reinigungsmittel und Informationen zu deren Anwendung erhalten Sie von Reinigungsmittelherstellern wie z.B. der Firma Buzil (www.buzil.com). An bereits beschädigten Oberflächen, kann es durch Einwirkung jeglicher Art von Reinigungsmitteln zu einer Erweiterung des Schadens kommen.

Eine Gewährleistung für Schäden die aus unsachgemäßer Reinigung hervorgegangen sind ist ausgeschlossen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich an die RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Tel. + 49 7361 504-0.

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3644
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

